



PENTRON SYSTEMS SOLUTION
Build-It™ FR • Breeze™ • FibreKleer™ 4x

Tři propojené produkty. Jeden dokonalý systém.

Postup 1

Breeze™


Samoadhezivní
pryskyřičný cement

Build-It™ FR

Skelnými vlákny vyztužený
dostavbový materiál

FibreKleer™ 4x

Skelnými vlákny vyztužené
kompozitní čepy

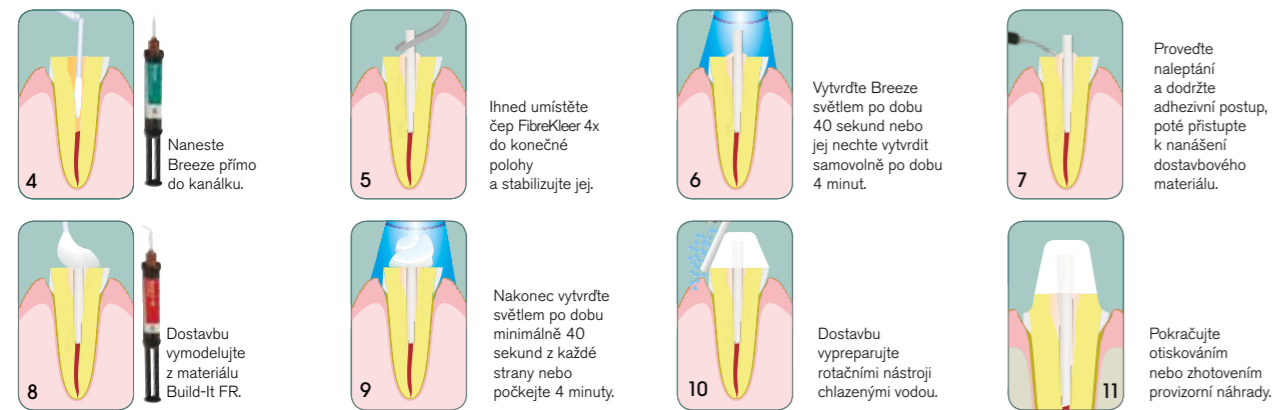

Postup 2


MONOBLOCK

Build-It™ FR

Skelnými vlákny vyztužený
dostavbový materiál

FibreKleer™ 4x

Skelnými vlákny vyztužené
kompozitní čepy

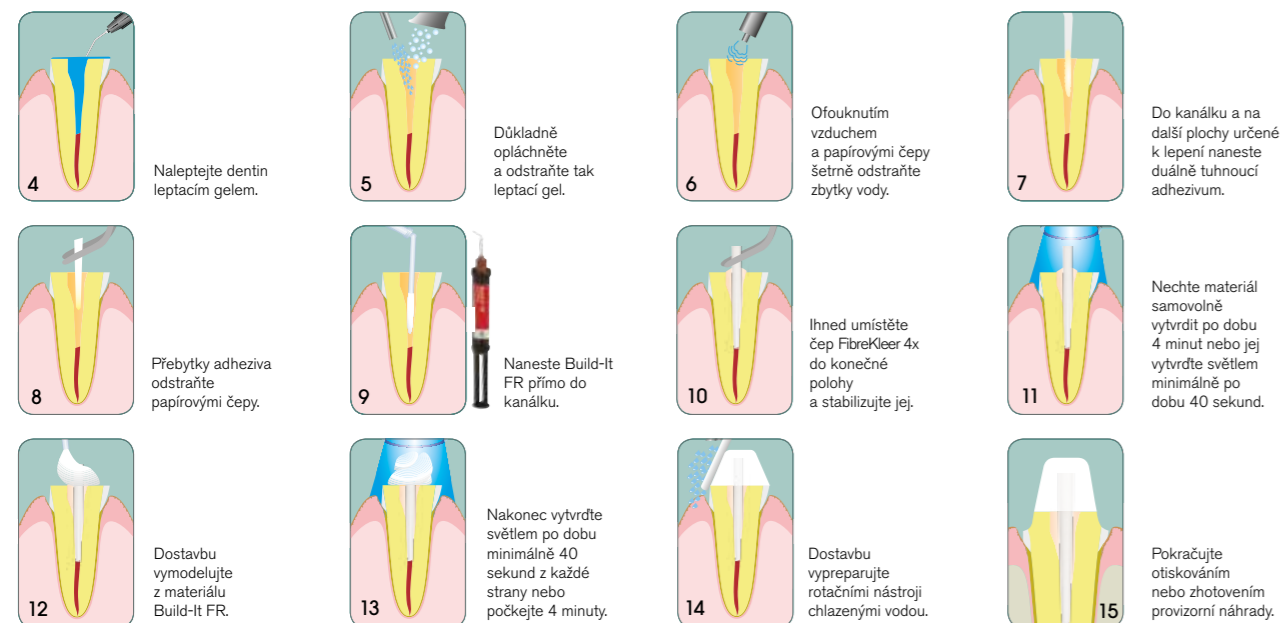

Breeze™

Breeze Intro Kit.....N97

3x 4ml stříkačka A2, 1x 4ml stříkačka translucenční, 1x 4ml stříkačka bílý opákní, 1x 3ml lahvička Silan, 40x automix koncovka, 10x míchací koncovka, 10x endodontická koncovka, návod

Breeze Refill

1x 4ml stříkačka, 12x automix koncovka, návod
A2.....N97B
translucenční.....N97A
bílý opákní.....N97E
1x 3 ml lahvička Silan.....N04EA

Příslušenství

50x automix koncovka.....N33CA
50x míchací/50x endodontická koncovka.....N72AA
100x míchací/100x endodontická koncovka.....N72AB
100x automix koncovka.....N33C
1x aplikační pistole 1:1 na automix stříkačky.....N75S

Build-It™ FR

Build-It FR Mini-Mix Kit.....N32F

5x 4ml stříkačka (A2, A3, modrý, zlatý, bílý opákní), 25x míchací koncovka, 25x intraorální koncovka, návod

Build-It FR Mini-Mix

4x 4ml stříkačka, 20x míchací koncovka, 20x intraorální koncovka, návod
A2.....N32FA
A3.....N32FB
bílý opákní.....N32FE

Build-It FR Mini-Mix Refill

1x 4ml stříkačka, 5x míchací koncovka, 5x intraorální koncovka, návod
A2.....N32FS
A3.....N32FSA
modrý.....N32FSC
zlatý.....N32FSB
bílý opákní.....N32FSD

Mini-Mix příslušenství

48x míchací/48x intraorální koncovka.....N32GA
100x míchací/100x intraorální koncovka.....N32GB
1x aplikační pistole 1:1 na automix stříkačky.....N75S



PENTRON™

1717 West Collins Avenue
Orange, CA 92867
800.551.0283
855.748.2964
www.pentron.com

SpofaDental a.s.
Markova 238, 506 01 Jičín
tel.: (+420) 493 583 277
e-mail: salesCR@pentron.com
www.pentron.cz

PSSCz0916/02

Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby v tomto reklamním materiálu a technické či jiné změny bez předchozího upozornění.

FibreKleer™ 4x

FibreKleer 4x Parallel Post Kit..... N83A

15x paralelní čep s retenční hlavičkou – 5x od velikosti: 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm, 3x vrtáček - 1x od velikosti: 1,00 mm, 1,25 mm, a 1,50 mm

FibreKleer 4x Tapered Post Kit..... N83B

15x kónický čep – 5x od velikosti: 1,25 mm, 1,375 mm, 1,50 mm, 3x vrtáček – 1x od velikosti: 1,25 mm, 1,375 mm, a 1,50 mm

FibreKleer 4x Original Post Kit..... N83C

15x originální (vroubkovaný) čep – 5x od velikosti: 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm, 3x vrtáček - 1x od velikosti: 1,00 mm, 1,25 mm, a 1,50 mm

FibreKleer 4x Parallel Post Refills

10x čep 1,00 mm (červený).....N83AA
10x čep 1,25 mm (žlutý).....N83AB
10x čep 1,50 mm (modrý).....N83AC

FibreKleer 4x Tapered Post Refills

10x čep 1,25 mm (černý).....N83BA
10x čep 1,375 mm (fialový).....N83BB
10x čep 1,50 mm (zelený).....N83BC

FibreKleer 4x Original Post Refills

10x čep 1,00 mm (červený).....N83CA
10x čep 1,25 mm (žlutý).....N83CB
10x čep 1,50 mm (modrý).....N83CC

FibreKleer 4x Post Tapered Drill Refills

1x vrtáček 1,25 mm (černý).....N81CA
1x vrtáček 1,375 mm (fialový).....N81CB
1x vrtáček 1,50 mm (zelený).....N81CC

FibreKleer 4x Post Parallel / Original Drill Refills

1x vrtáček 1,00 mm (červený).....N18DA
1x vrtáček 1,25 mm (žlutý).....N18DB
1x vrtáček 1,50 mm (modrý).....N18DC

* Vzhledem k velikosti není čep ve velikosti 1,00 mm vroubkovaný



PENTRON SYSTEMS SOLUTION
Build-It™ FR • Breeze™ • FibreKleer™ 4x

PENTRON™

Postendodontické ošetření je efektivní a časově úsporné díky



● PENTRON SYSTEMS SOLUTION
Build-It™ FR • Breeze™ • FibreKleer™ 4x

Věděli jste, že tyto 3 produkty se skvěle doplňují?

Vyzkoušejte je!

Breeze™

Breeze poskytuje rychlou a spolehlivou fixaci nepřímých náhrad stejně jako čepů FibreKleer 4x.

FibreKleer™ 4x

FibreKleer 4x pomáhá zajistit retenci pro dostavby.

Build-It™ FR

Při umístění se čep FibreKleer 4x spojí s dostavbovým materiálem Build-It FR a kořenem a vytvoří tak monoblok s podobnými ohybovými vlastnostmi. Konečným výsledkem je čep, který bezpečně udrží dostavbu a současně zachovává integritu zbývající zubní struktury.

Breeze™

Samoadhezivní pryskyřičný cement

Výhody:

- **Výjimečná síla vazby** – přilne k dentinu a ke sklovině bez použití bondu
- **Duálně tuhnoucí** – polymeruje světlem i chemicky a nabízí tak maximální všestrannost
- **Neutrální vůně**
- **Minimalizuje citlivost po ošetření** – jedнокroková metoda bez nutnosti leptání




FibreKleer™ 4x

Skelnými vlákny vystužené kompozitní čepy

Výhody:

- **Silný a flexibilní** – ohýbá se podle dentinu
- **Translucentní** čepy pomáhají vytvářet přirozeně vypadající náhrady
- **4x vyšší rentgenkontrastnost** než hliník
- **Nové barevné kódování** čepů a vrtáčků
- **Různé velikosti a tvary**

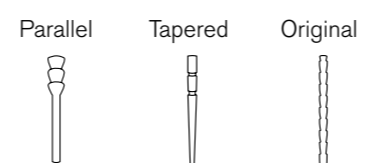

Build-It™ FR

Skelnými vlákny vystužený dostavbový materiál

Výhody:

- **Snadná manipulace** – zateká tām, kam potřebujete a lze jej vrstvit aniž by stékal
- **Speciálně ošetřená** skelná vlákna zajišťují vysokou pevnost v tlaku pro pevný a spolehlivý základ
- **Duální tuhnutí** (světlem nebo chemicky polymerující) pro maximální flexibilitu
- **Rychlejší** než při použití kompozitu, bez potřeby vytvrzení ve 2mm vrstvě
- **Rentgenkontrastní** pro snadnou detekci okrajových oblastí při RTG vyšetření



Klinický případ

Postendodontické ošetření s použitím Pentron Systems Solution. Snímky poskytnuty s laskavým svolením MDDr. Martina Košťála z Hradce Králové.



Iniciální situace zubů 45 a 46. Preendodontická dostavba pomocí kompozitu Simile. Následovalo kompletní endodontické ošetření.



Ohlazení stěn kořenového kanálku pomocí FibreKleer 4x vrtáčku a výběr velikosti čepu FibreKleer 4x.



Fixace FibreKleer 4x pomocí samoadhezivního pryskyřičného cementu Breeze.



Leptání obou kavit gelem Etching gel.



Aplikace adheziva Retensin Plus.



Kavity vyplněny duálně tuhoucím kompozitním dostavbovým materiálem Build-It FR.



FibreKleer 4x čepy byly zkráceny diamantovým brousčkem. Zub 45 byl dostavěn kompozitem Simile. Obě dostavby dokončeny pro preparaci na korunky.